

 **Mortara**

DISPOSITIVO  
AMBULO 2400

# Ambulo 2400

Diagnóstico innovador, Cuidado mejorado



La tecnología oscilométrica del dispositivo **Ambulo™ 2400**, combinada con un diseño cómodo y ligero, ofrece a los médicos una herramienta útil en el diagnóstico y la comprensión de la hipertensión. Su ajuste cómodo y el buen funcionamiento facilitan la aceptación y uso del paciente a las repetidas mediciones de la presión arterial. Este dispositivo centrado en el paciente permite a los individuos llevar a cabo sus actividades diarias, y por lo tanto ofrece una visión completa de las tendencias de la presión arterial durante todo el ciclo circadiano. Finalmente, los médicos y los pacientes se beneficiarán de la obtención de datos reales y significativos.




**PRECISIÓN DEMOSTRADA** – Validado según los protocolos y normas ANSI/AAMI SP-10:2002 y de la Sociedad Británica de Hipertensión (British Hypertension Society, BHS) (Grado A/A) e ISO 81060-2:2009, el dispositivo Ambulo 2400 ofrece resultados precisos para que los médicos puedan tener confianza en los datos adquiridos.

**TECNOLOGÍA DE CONFIANZA DE UN MARCA FIABLE** – Utiliza la tecnología oscilométrica patentada que está respaldada por una sólida reputación de calidad, asociada con el nombre de Mortara.

**OPCIÓN ACTIGRAFÍA** – Determinación automática de los ciclos de sueño/vigilia que reduce la dependencia de diarios de los pacientes.


**CÓMODO PARA LOS PACIENTES** – Los manguitos EasyWear™ permiten usar todo el dispositivo en el brazo, proporcionando una solución ideal para usuarios activos.

## Mínimas interrupciones, Optimiza los resultados

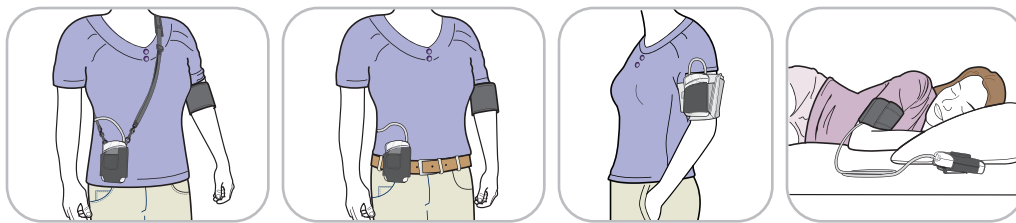

La flexibilidad del dispositivo Ambulo 2400 ofrece una amplia gama de opciones para llevar puesto.

Gráfico que ilustra la presión arterial del ritmo circadiano las 24 horas, incluida la disminución nocturna y el alza de la mañana

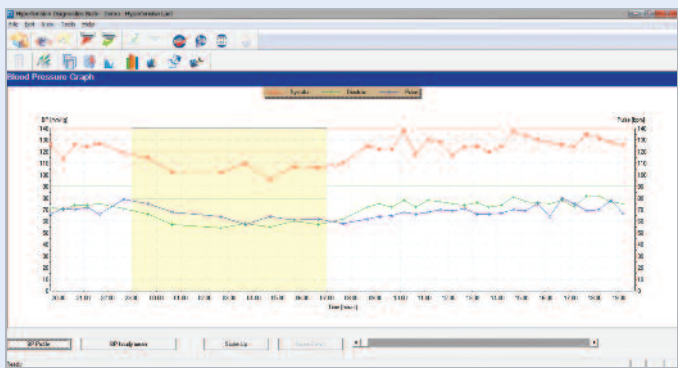

Con amplias capacidades de almacenamiento y presentación de informes, el dispositivo Ambulo 2400 puede servir como una herramienta eficaz en el manejo de los pacientes en el hospital, la clínica y entornos de investigación.

- Descarga de los resultados de la medición.
- Importación y exportación de datos utilizando formatos estándar de la industria tales como XML y CSV.
- Visualización de los resultados estadísticos y generación de informes completos en una variedad de formatos, incluyendo el formato detallado y resumido.
- Evaluación de resultados de las pruebas para evaluar el progreso y comparar los informes del paciente teniendo en cuenta las variables como el historial de medicamentos.
- Proporciona ventajas a partir de las estadísticas detalladas incluyendo los factores de carga, porcentajes de baja nocturna, presión del pulso, y AASI (índice de rigidez arterial ambulatoria) en el análisis de los datos del paciente y la formulación de conclusiones.
- Utilización de las características de permiso del software como múltiples nombres y funciones de usuario y contraseñas únicas a fin de abordar las preocupaciones relacionadas con HIPAA dentro de su organización.

El software del Conjunto de diagnóstico de hipertensión cuenta con una interfaz intuitiva. El sistema es fácil de programar con una herramienta de configuración de un solo clic. También se incluyen en el software las capacidades de calibración y diagnóstico del equipo.

Los médicos que se familiaricen con el dispositivo Ambulo 2400 llegarán a apreciar un enfoque exclusivamente centrado en el paciente para la monitorización ambulatoria de la presión arterial.



Búsqueda de pacientes



Nuevos pacientes



Configurar el dispositivo



Transferencia de datos desde el dispositivo



Importar y Exportar



**MORTARA INSTRUMENT, INC.**

7865 North 86th Street  
Milwaukee, WI 53224  
EE.UU.

Tel: 414.354.1600  
Tel: 800.231.7437  
Service: 888.MORTARA  
Fax: 414.354.4760